




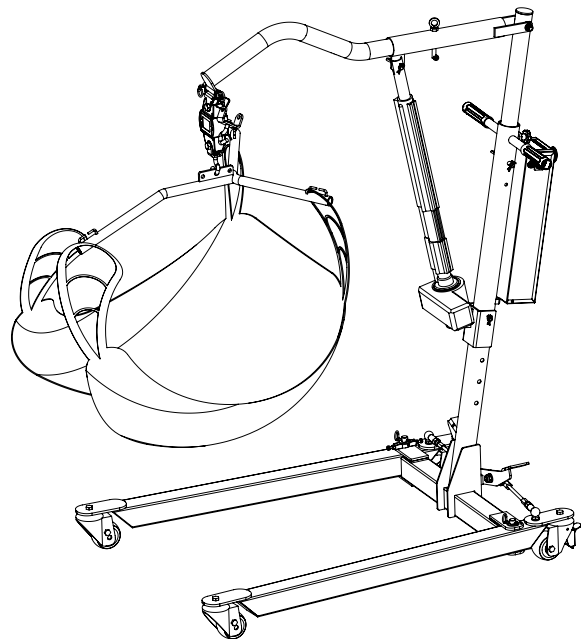

ELEVADOR INDIVIDUAL TRANSFER HOSPITALAR

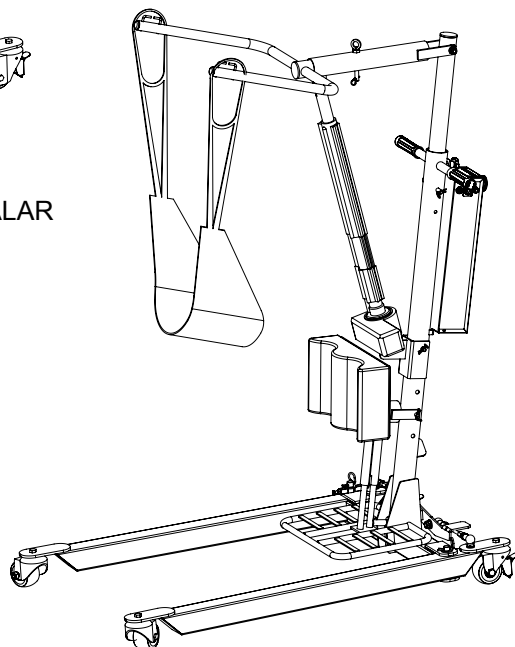

ELEVADOR INDIVIDUAL HOSPITALAR STAND-UP

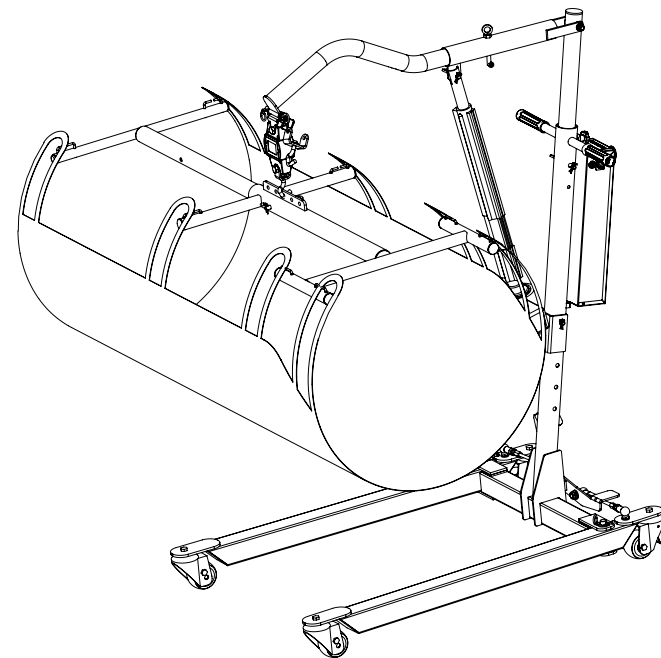

ELEVADOR INDIVIDUAL TRANSFER HOSPITALAR C/ MACA

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 08/06/2010

FOLHA 1 DE 15

ESCALA: 1:20




DESCRIÇÃO:


ELEVADOR 200KG

REV.:


G

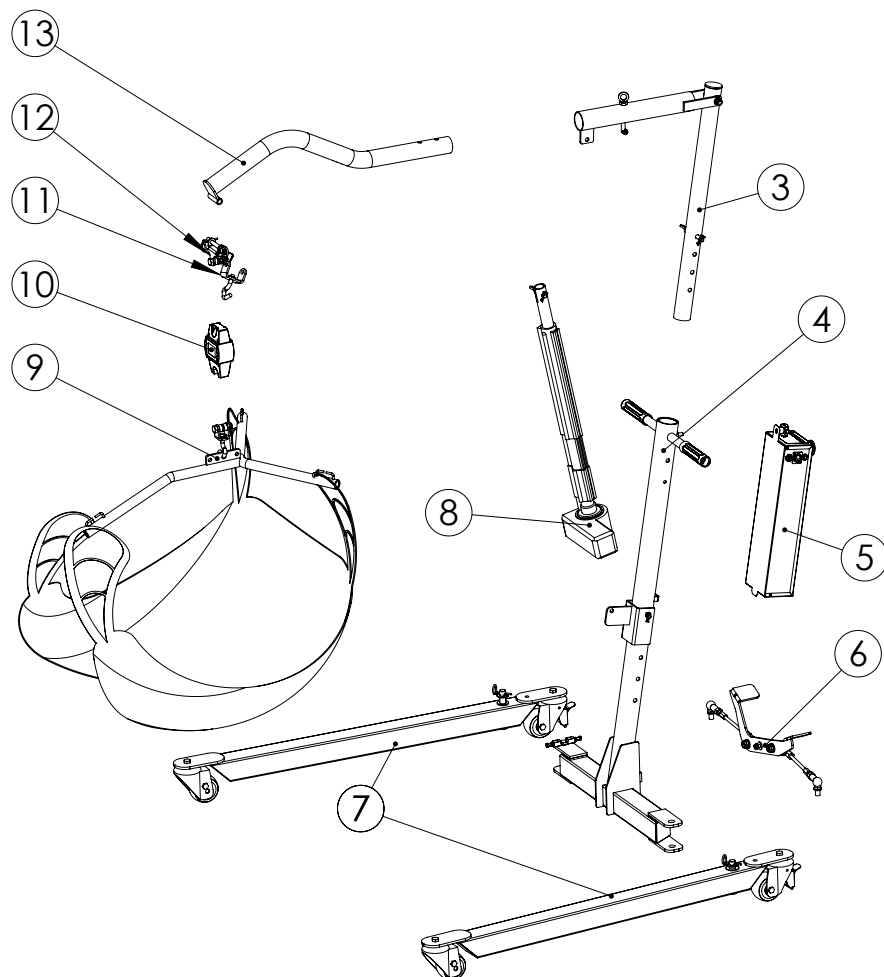

ELEVADOR INDIVIDUAL TRANSFER HOSPITALAR

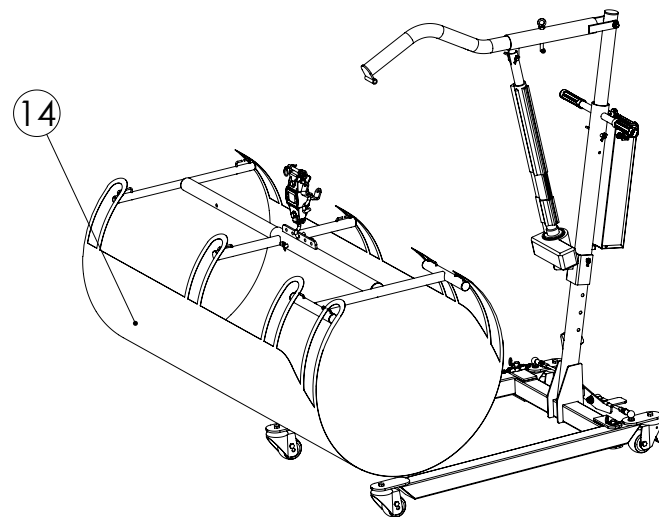

ELEVADOR INDIVIDUAL TRANSFER HOSPITALAR C/ MACA

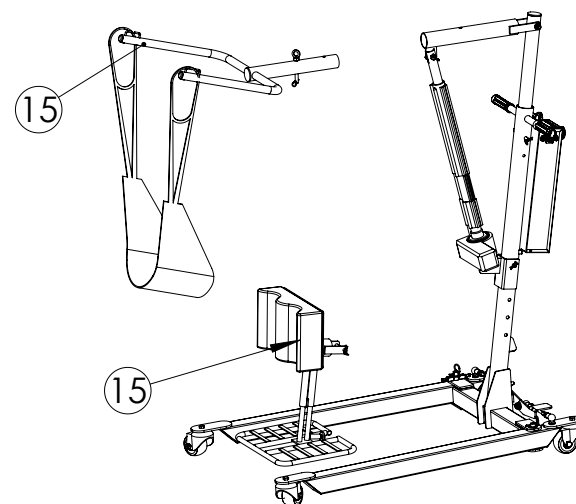

ELEVADOR INDIVIDUAL HOSPITALAR STAND-UP

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

ELEVADOR 200KG

DES.: JONATHAN M.

DATA: 08/06/2010



FOLHA 2 DE 15

ESCALA: 1:25



REV.:

G

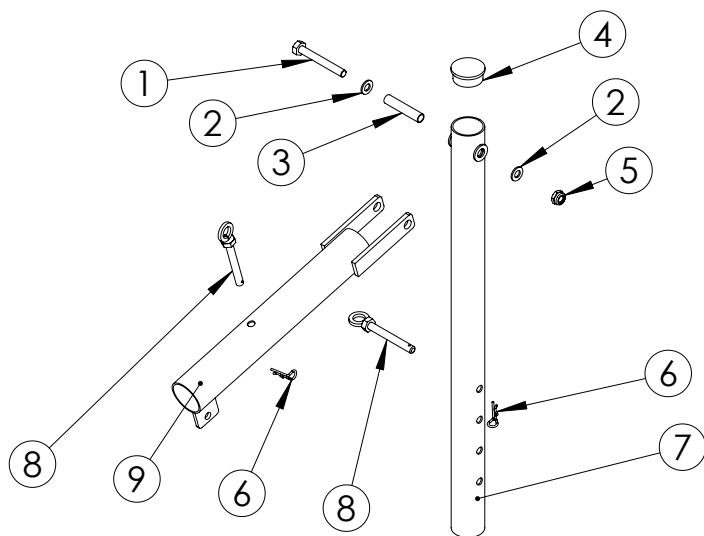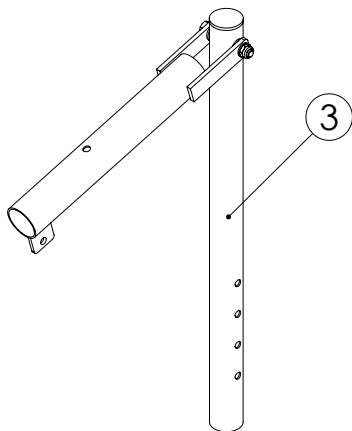

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
3	187515	CONJUNTO FIXAÇÃO TUBO LANÇA ELEV. 130KG/HOSPITALAR

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	11183.0	1	PA SEXT MA 8.8 10X80MM RP ZB
2	161.9	2	ARRUELA LISA 10MM ZB (S/L) (10,5X20X2)
3	168020	1	BUCHA FIXAÇÃO SUPORTE ELEV. INDIVIDUAL E HOSPITALAR
4	137706	1	TAMPAO LANÇA GUINCHO 130KG
5	91.4	1	PO SEXT NY MA 10 MM CH 17 - 1.5 MM (S/L) 1.03.03.0
6	33565	2	GRAMPO R COM PESCOÇO 2,4MM EIXO 3/8POL
7	137069	1	PROLONGADOR MASTRO ELEV. INDIVIDUAL E HOSPITALAR
8	12129.0	2	PINO LANCA/MASTRO/BASE ATUADOR GUINCHO
9	137212	1	SUPORTE ELEVADOR INDIVIDUAL E HOSPITALAR

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 3 DE 15

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO FIXAÇÃO TUBO LANÇA ELEV.
130KG/HOSPITALAR

REV.:

A

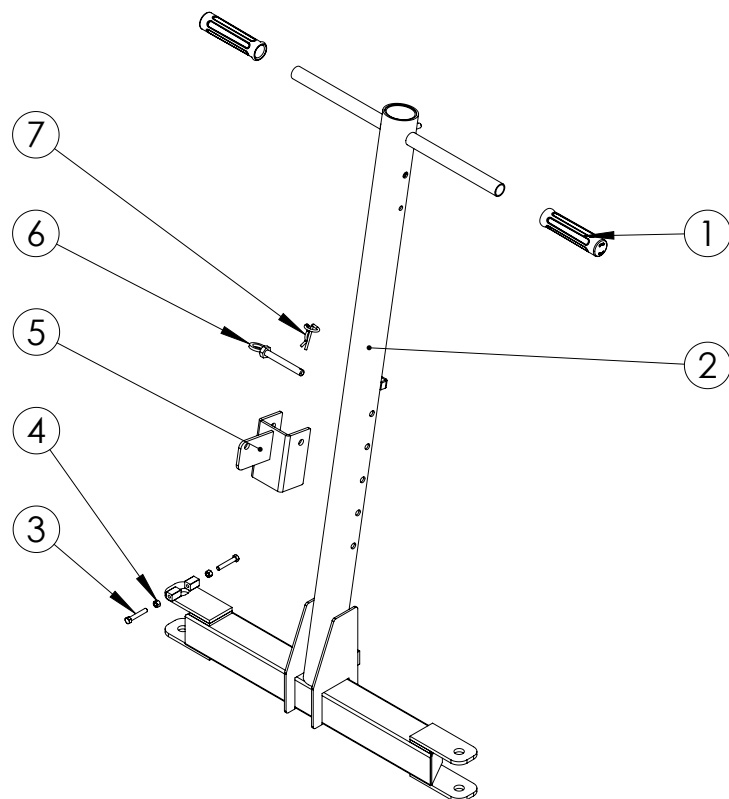

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	231.3	2	MANOPLA COMBATE PRETA (S)
2	137423	1	MASTRO COM BASE ELEV. HOSPITALAR
3	981.4	2	PA SEXT MA 8.8 8X16MM RT ZB (S/L)
4	891.5	2	PO SEXT UNC 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
5	166216	1	REGULADOR ALTURA ELEV. HOSPITALAR
6	12129.0	1	PINO LANCA/MASTRO/BASE ATUADOR GUINCHO
7	33602	1	GRAMPO R COM PESCOÇO 3,5MM EIXO 5/8POL

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 4 DE 15

ESCALA: 1:12





DESCRIÇÃO:

MASTRO COM BASE ELEV. HOSPITALAR

REV.:

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	9772	1	CARREGADOR ELEVADOR/STAND-UP MN AUTOMATICO

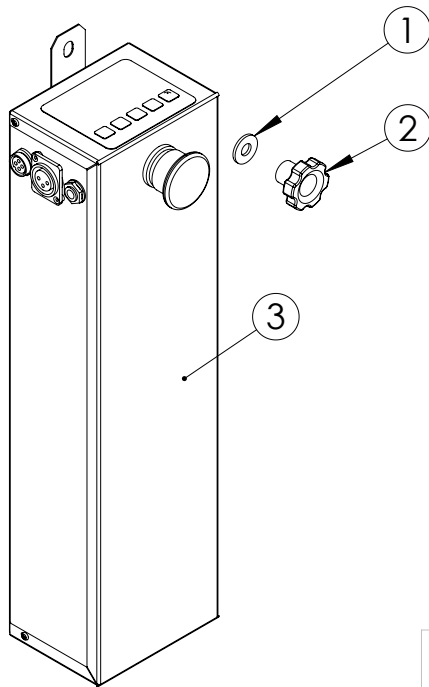
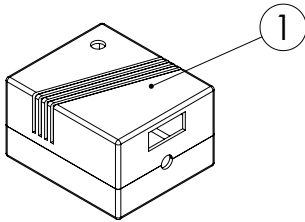


ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	461.8	1	ARRUELA LISA 5/16" ZB(281 PC-KG)(S) (9X21X2)
2	147878	1	MANIPULO TERMOPLASTICO MACHO M8X1,25
3	150164	1	COMANDO / BATERIA ELEV. HOSPITALAR 7,5A COMP. ELET.

APLICAÇÃO:	DES.: JONATHAN M.	DATA:	 
	FOLHA 5 DE 15	ESCALA: 1:5	
			REV.: C

DESCRIÇÃO:
COMANDO / BATERIA ELEV. HOSPITALAR 7,5A

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
6	187615	CONJUNTO PEDAL DE ABERTURA PLATAFORMA ELEV. HOSPITALAR

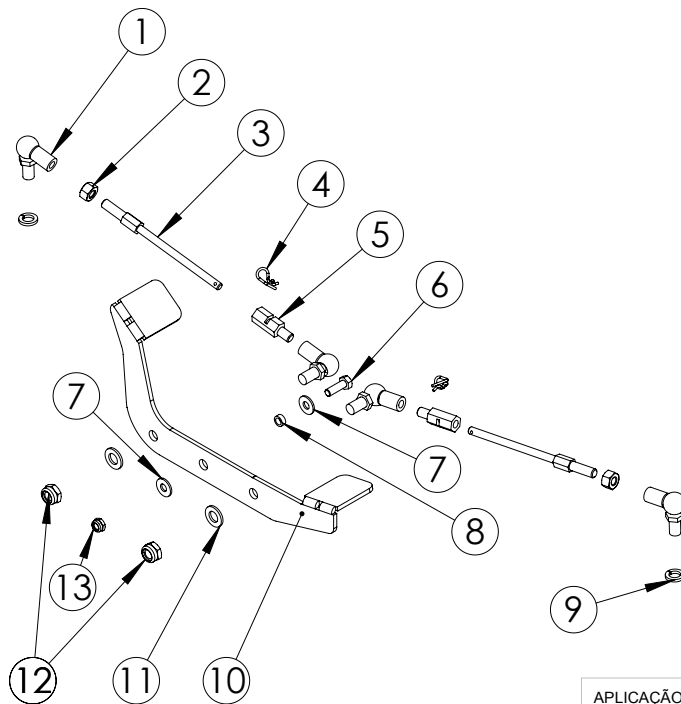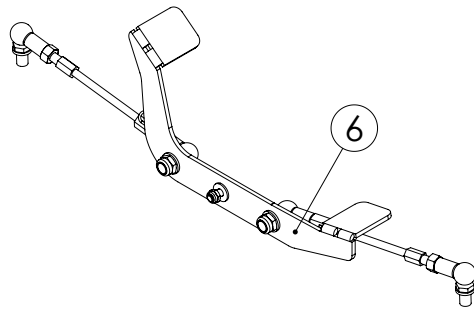

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	173722	4	TERMINAL DE EMBREAGEM 10X12 CAMINHOES MB 1113
2	12270.0	2	PO SEXT MA 10 MM CH 17 ZB - 1,5 MM (S/L)
3	173758	2	VARAO ABERTURA PLATAFORMA HOSPITALAR
4	33565	2	GRAMPO R COM PESCOÇO 2,4MM EIXO 3/8POL
5	178110	2	REGULADOR ABERTURA INDIVIDUAL/HOSPITALAR USINADO [1801]
6	12534.2	1	PA SEXT MA 8.8 8X25MM RT ZB (S/L)
7	461.8	2	ARRUELA LISA 5/16" ZB(281 PC-KG)(S) (9X21X2)
8	180527	1	BUCHA DO PEDAL GUINCHO
9	6148.4	2	ARRUELA PRESSAO 12MM MM ZB
10	170935	1	PEDAL ABERTURA GUINCHO
11	2751.0	2	ARRUELA LISA 12MM ZB (S) (13X24X2,5)
12	191.0	2	PO SEXT NY MA 12 MM CH 19 ZB - 1,75 MM (S) 1.03.03
13	791.9	1	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 6 DE 15

ESCALA: 1:8




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO PEDAL DE ABERTURA PLATAFORMA ELEV. HOSPITALAR

REV.:

A.01

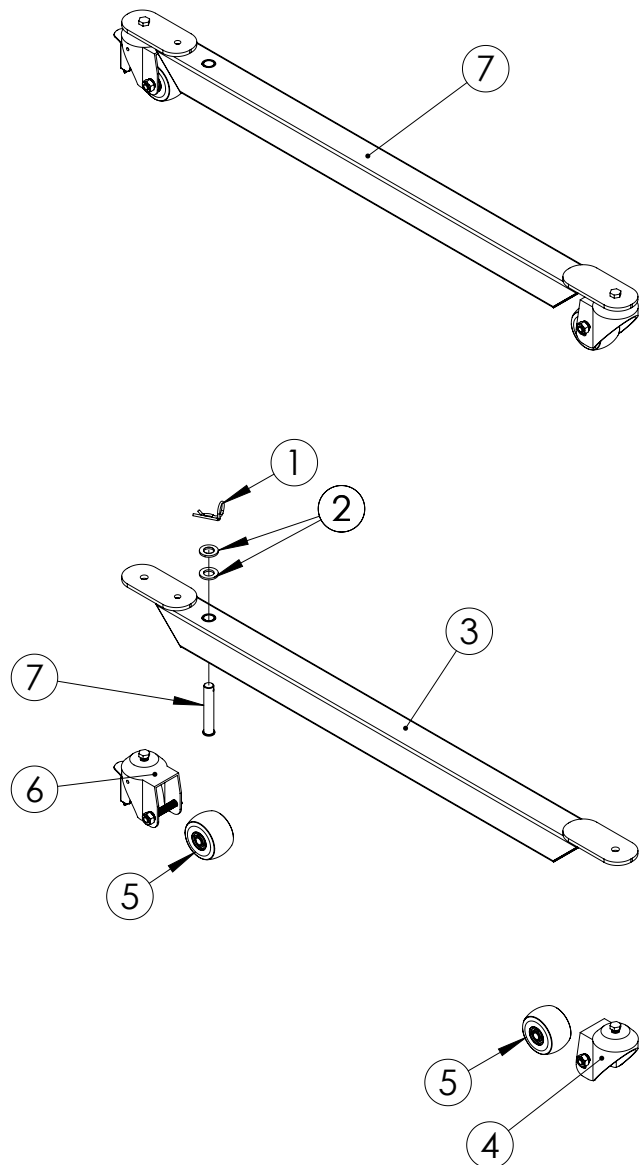

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
7	187556	1	CONJUNTO PLATAFORMA ELEV. HOSPITALAR [1908]

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	33602	1	GRAMPO R COM PESCOÇO 3,5MM EIXO 5/8POL
2	8003.9	2	ARRUELA LISA 16MM ZB (L)
3	137618	1	PLATAFORMA ELEV. HOSPITALAR
4	10894.4	1	GARFO GRR 414 S/RODA C/EIXO (S)
5	126766	2	RODA MONTADA GUINCHO HOSPITALAR
6	10895.2	1	GARFO GRR0A 414 S/RODA C/EIXO (S)
7	137440	1	PINO PLATAFORMA ELEV. HOSPITALAR LE
	145954	1	PINO PLATAFORMA ELEV. HOSPITALAR LD

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 7 DE 15

ESCALA: 1:12




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO PLATAFORMA ELEV. HOSPITALAR

REV.:

A

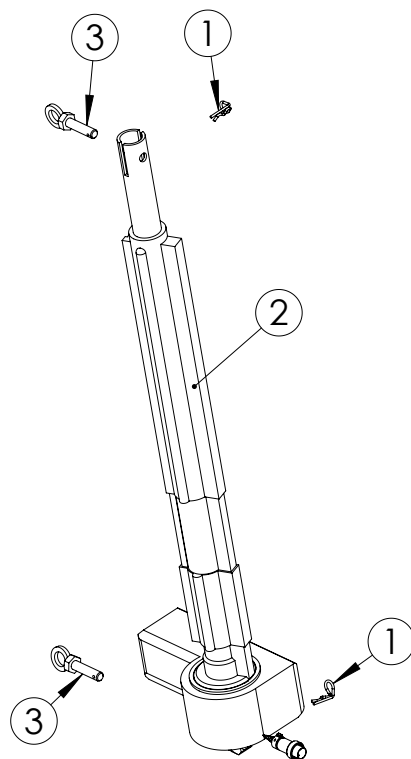

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	33565	2	GRAMPO R COM PESCOÇO 2,4MM EIXO 3/8POL
2	28082	1	ATUADOR ELEVADOR 130/200KG
3	12130.4	2	PINO 10X40 MM

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 8 DE 15

ESCALA: 1:8




DESCRIÇÃO:

ATUADOR ELEVADOR 130/200KG

REV.:

A

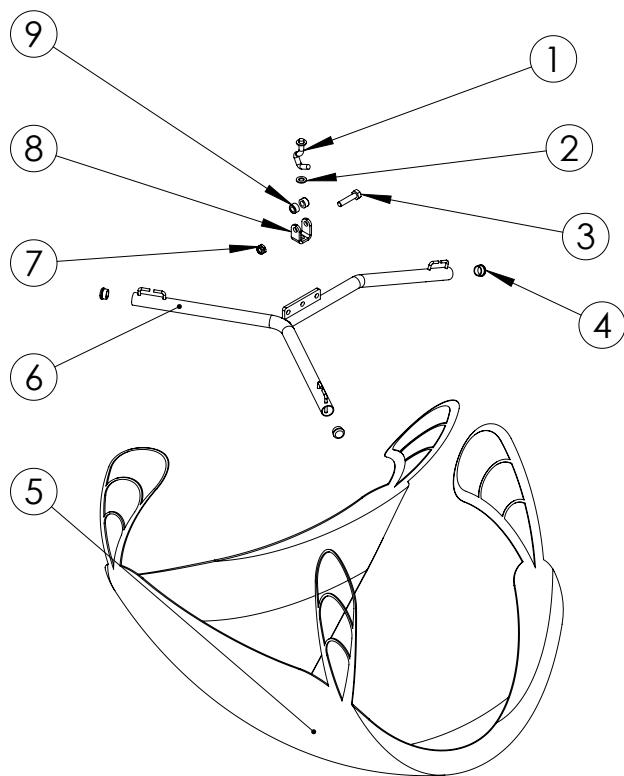

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	11366.2	1	GANCHEIRA GUINCHO
2	161.9	1	ARRUELA LISA 10MM ZB (S/L) (10,5X20X2)
3	6887.0	1	PA SEXT MA 8.8 10X45MM RT ZB (S/L)
4	252.6	3	TAMPAO 7/8" (2,48GR) (S)
5	18550	1	SELETE 200KG
6	11368.9	1	CABIDE GUINCHO
7	91.4	1	PO SEXT NY MA 10 MM CH 17 - 1.5 MM (S/L) 1.03.03.0
8	137068	1	SUPORE GANCHEIRA INVERTIDO
9	14987.0	2	BUCHA SEM CABECA 10MM TECNIL (GUIDOM SCOOTER)

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 9 DE 15

ESCALA: 1:15




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO GUINCHO TRANSFER HOSPITALAR

REV.:

D

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
10	17968.0	DINAMOMETRO ELETRONICO

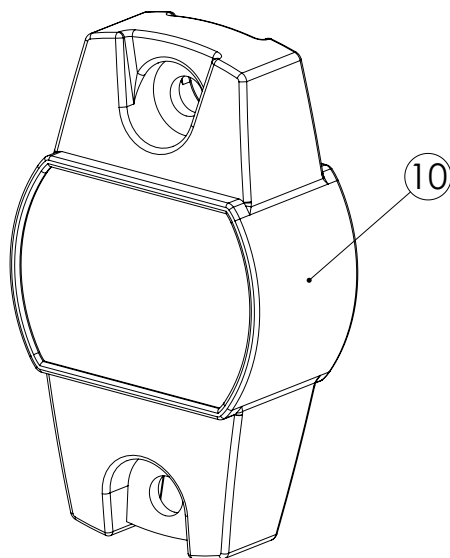

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 10 DE 15

ESCALA: 1:2




DESCRIÇÃO:

DINAMOMETRO ELETRONICO

REV.:

A

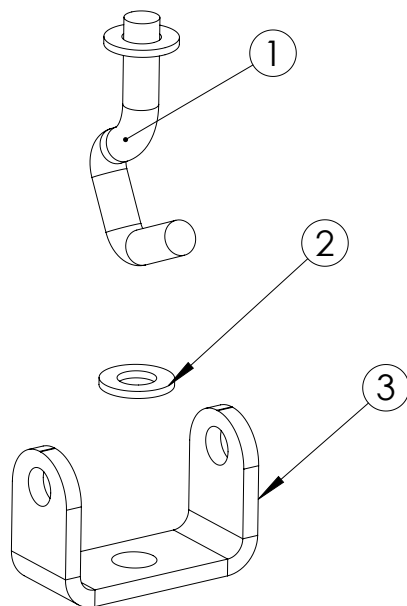

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	11366.2	1	GANCHEIRA GUINCHO
2	161.9	1	ARRUELA LISA 10MM ZB (S/L) (10,5X20X2)
3	172445	1	SUORTE GANCHEIRA 200Kg S/BALANÇA

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 11 DE 15

ESCALA: 1:2




DESCRIÇÃO:

TROCA RAPIDO ELEV. HOSPITALAR

REV.:

A

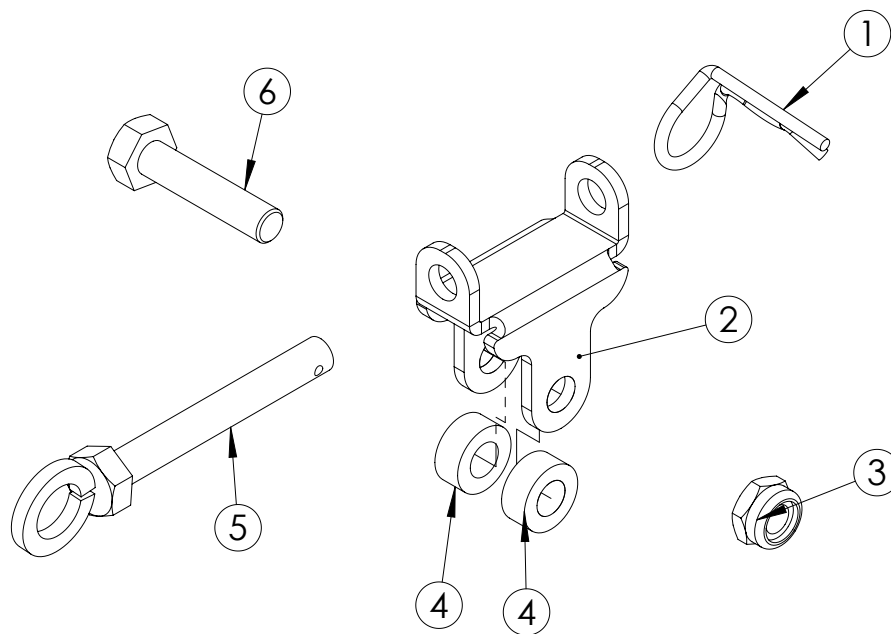

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	33602	1	GRAMPO R COM PESCOÇO 3,5MM EIXO 5/8POL
2	150970	1	CRUZETA ELEV. HOSPITALAR
3	91.4	1	PO SEXT NY MA 10 MM CH 17 - 1.5 MM (S/L) 1.03.03.0
4	141412	2	SEPARADOR SUPERIOR DINAMÔMETRO GUINCHO
5	12129.0	1	PINO LANCA/MASTRO/BASE ATUADOR GUINCHO
6	6887.0	1	PA SEXT MA 8.8 10X45MM RT ZB (S/L)

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 12 DE 15

ESCALA: 1:2




DESCRIÇÃO:

SUPORTE FIXAÇÃO BALANÇA ELEV. HOSPITALAR


REV.:

-.02


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
13	137061	LANÇA ELEV. TRANSFER HOSPITALAR

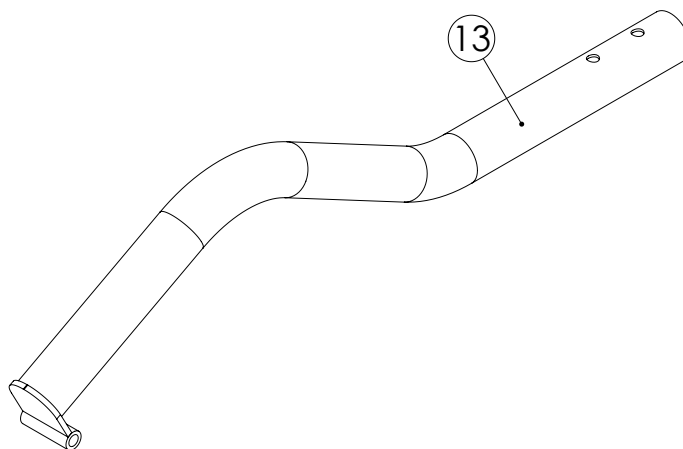

APLICAÇÃO:	DES.: JONATHAN M.	DATA:	
	FOLHA 13 DE 15	ESCALA: 1:6	
			DESCRIÇÃO: LANÇA ELEV. TRANSFER HOSPITALAR
			REV.: E

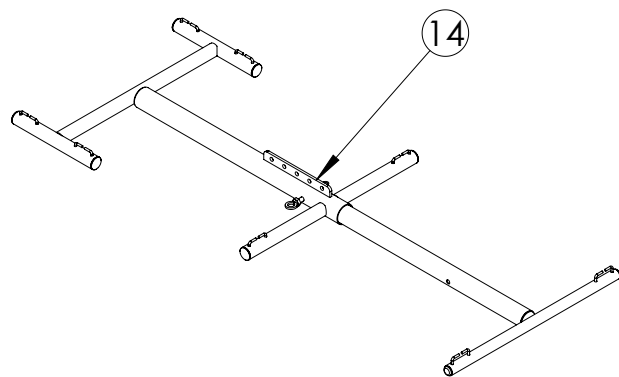

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
14	175179	CONJUNTO SUPORTE MACA ELEVADOR HOSPITALAR

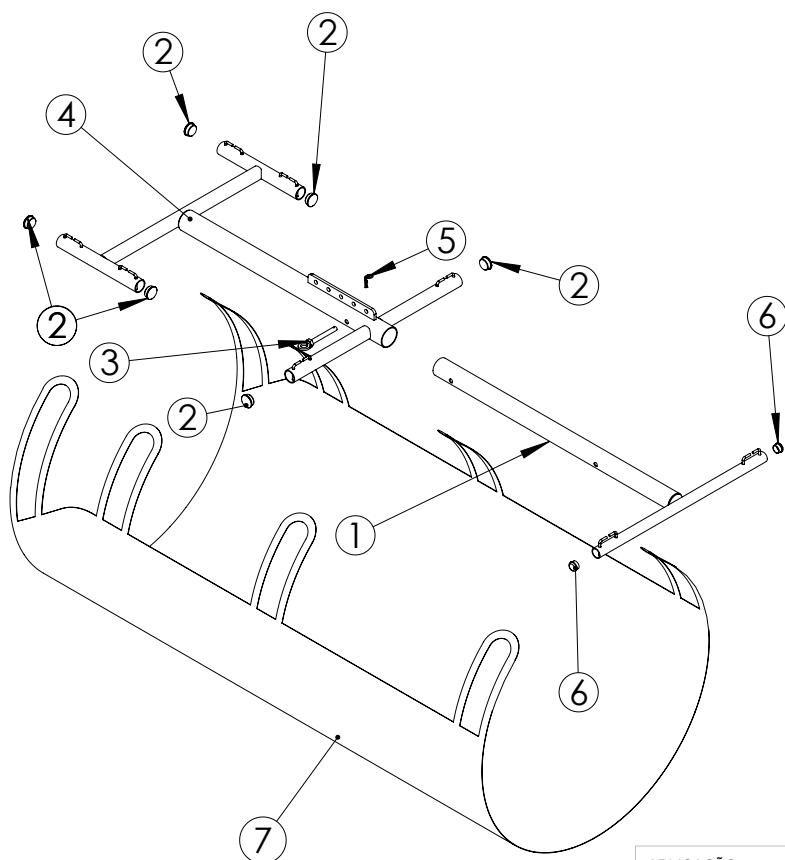

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	175178	1	SUPORTE PERNAS MACA ELEVADOR HOSPITALAR
2	180212	6	TAMPÃO 1"1/4 PAREDE 2,25
3	12129.0	1	PINO LANCA/MASTRO/BASE ATUADOR ELEVADOR
4	175167	1	SUPORTE TRONCO MACA ELEVADOR HOSPITALAR
5	33565	1	GRAMPO R COM PESCOÇO 2,4MM EIXO 3/8POL
6	252.6	2	TAMPAO 7/8" (2,48GR) (S)
7	24790	1	SELETE MACA 200KG

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 14 DE 15

ESCALA: 1:17




DESCRIÇÃO:


MACA

REV.:

A.03

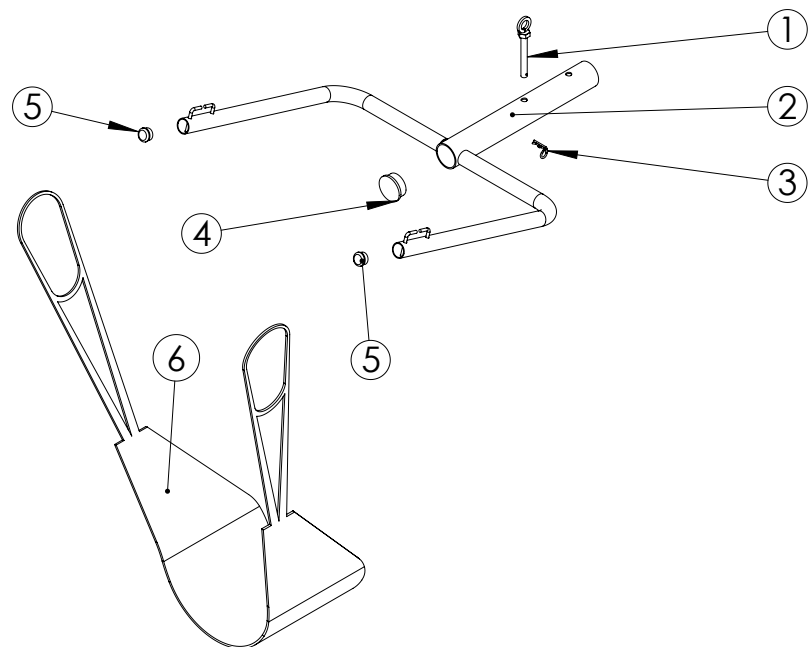

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	12129.0	1	PINO LANCA/MASTRO/BASE ATUADOR ELEVADOR
2	11367.0	1	LANCA DUPLA GUINCHO
3	33565	1	GRAMPO R COM PESCOÇO 2,4MM EIXO 3/8POL
4	137706	1	TAMPAO LANÇA ELEVADOR 130KG
5	252.6	2	TAMPAO 7/8" (2,48GR) (S)
6	239	1	COLETE GUINCHO

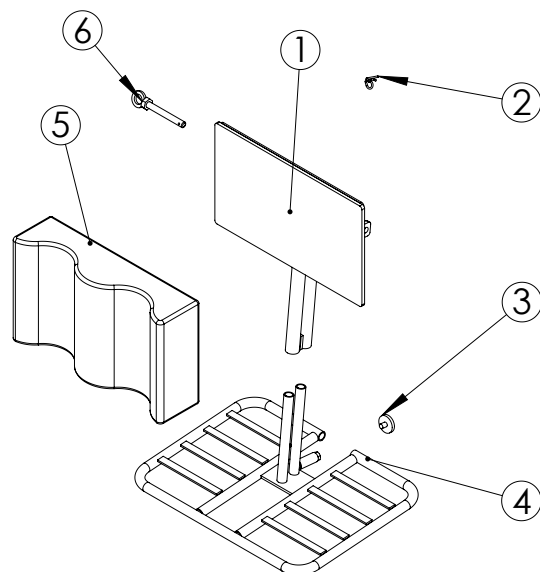

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	188344	1	SUORTE JOELHEIRA GUINCHO C/ EVA
2	33565	1	GRAMPO R COM PESCOÇO 2,4MM EIXO 3/8POL
3	6991.4	1	COXIM MENOR ESCAPAMENTO 8MM (S/L)
4	146035	1	PE GUINCHO BASE QUADRADA
5	28658	1	CONJUNTO ESTOFADO GUINCHO STAND UP
6	12129.0	1	PINO LANCA/MASTRO/BASE ATUADOR ELEVADOR

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

STAND UP

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 15 DE 15

ESCALA: 1:12



REV.: